

KANMED^o BABYWARMER

Crecimiento óptimo de un modo seguro y simple
Para bebés prematuros, a término y recién nacidos.





ESTO ES POR LO QUE SE DEBE USAR EL KANMED BABY WARMER.

Durante los últimos 20 años más de un millón de bebés de bajo peso y prematuros han sido eficientemente calentados sobre el Colchón de Agua de Kanmed.

- El Sistema de calentamiento Baby Warmer de Kanmed está diseñado para mantener perfectamente calientes a bebés prematuros, a término o recién nacidos, habiendo realizado investigaciones con éxito.
- Por consiguiente está probado que los bebés salen antes de la incubadora, están más relajados, duermen mejor y tienen un crecimiento más óptimo.
- El cálido y suave Colchón de Agua del Sistema de Calentamiento de Kanmed y el Nido de contención proporcionan un calor y bienestar similar al que se consigue piel con piel "Método Canguro".
- El Sistema de Calentamiento Baby Warmer de Kanmed proporciona el alta del Hospital antes, con lo que se reduce el coste del tratamiento.
- El Sistema de Calentamiento Baby Warmer de Kanmed es fácil y seguro de usar, pensando en el bienestar del bebe, los padres y el personal del Hospital.

VENTAJAS DEL COLCHÓN DE AGUA DE KANMED

El agua caliente contiene mucha energía. Por lo tanto el bebe no puede enfriar el agua, así que la temperatura de la piel del bebe se convierte en la temperatura del agua – lo que hace del Colchón de Agua el modo más eficiente y seguro de mantener al bebe a 37°C. El Colchón de Agua Kanmed establece un balance térmico con el bebe por lo que el bebe puede dedicar la mayor parte de su energía a lo que es importante – un crecimiento óptimo, en vez de usar su energía intentando mantenerse caliente.

Otra ventaja – en caso de interrupción de la energía (corte eléctrico), el Colchón de Agua mantendrán al bebe a salvo caliente por 2 horas, ya que el agua se enfría lentamente.

“Solo un suave y cálido Colchón de Agua puede reemplazar la eficacia calentadora de una incubadora moderna”.

SISTEMA DE CALENTAMIENTO BABY WARMER DE KANMED

El Sistema de Calentamiento Baby Warmer de Kanmed es muy seguro y fácil de usar. Todos los componentes son de la más alta calidad para asegurar una vida larga y sin problemas. Correctamente usado asegurará un calentamiento óptimo a su bebe.

UNIDAD DE CONTROL



EL NUEVO SISTEMA DE CALENTAMIENTO BABY WARMER

20 años de experiencia están detrás del nuevo marcado CE Kanmed BabyWarmer.

El nuevo Sistema de Calentamiento BabyWarmer tiene 3 diferentes modalidades para calentar usando la misma Unidad de Control y Placa Térmica.

- 1 El suave y cálido Colchón de Agua Kanmed.
- 2 Un especial suave Colchón de Gel calentado.
- 3 Un Colchón de Foam calentado

Se puede también conectar una estándar YSI sensor de temperatura para chequear la temperatura del bebe.

COMPONENTES

Colchón de Agua: Todos los bebes desde 800 gr.



.....

Colchón de Gel: Bebes casi a termino desde 1500 gr. A bebes a termino




.....

Colchón de Foam: Bebes a término y para proporcionar calor por confort



EFICACIA DE CALENTAMIENTO

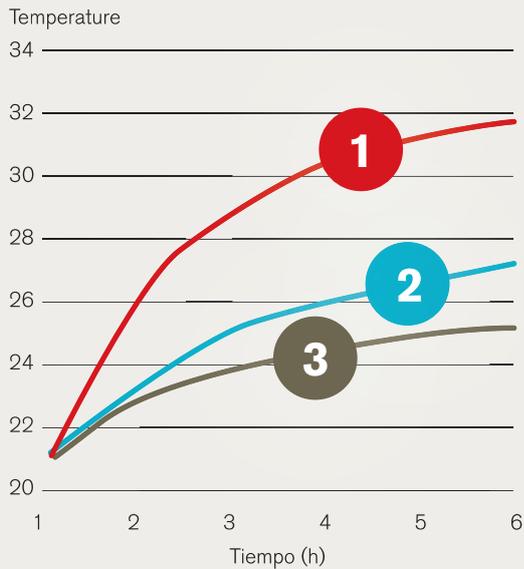

Botella de agua de 500 ml

- Colchón de Agua Kanmed
- Colchón de Gel Kanmed
- Colchón de Foam Kanmed

Para determinar la eficacia del calentamiento se colocó una botella de 500ml de agua sobre cada uno de los 3 tipos de colchón cuando la temperatura estaba a 37°C. La botella se cubrió con una toalla de algodón doblada en dos. La temperatura alcanzada en el agua fue registrada.

Como se muestra arriba, el Colchón de Agua es el que transmite una energía más alta y es por lo tanto el sistema de calentamiento más eficiente.

La eficacia del colchón de agua ha sido documentada en muchos estudios publicados.

Referencias incluidas: PH Gray et al, University of Queensland, Australia. Cot nursing using a heated water filled mattress ... (2004).

Acta Paediatrica 93:308-310 2004-03-18. Prevention of Neonatal Cold Injury in Preterm Infants. Ragnar Tunell. Ass. Professor emeritus Stockholm.

FÁCIL DE USAR



Se puede comenzar a calentar a un bebé prematuro en el Sistema de Calentamiento Baby Warmer de Kanmed desde el momento que el bebé está estable pero todavía requiere una mínima intervención clínica, tal que un soporte respiratorio leve!

Seleccione el tipo de colchón apropiado para las necesidades del bebé.

Introduzca la Placa Térmica dentro del bolsillo bajo el colchón. Introduzca el colchón en el Nido de Contención Kanmed.

Presione comenzar y ajuste la temperatura.

Cuando la "Sonrisa" en la Unidad de Control está en verde la temperatura del colchón es adecuada para el bebé.

BENEFICIOS

- Proporciona un crecimiento óptimo
- *Limpio* y fácil de usar
- Reducción considerable de coste comparado con el uso de incubadora

CONFIGURE SU SISTEMA DE CALENTAMIENTO BABY WARMER KANMED

Diferentes medidas de nidos, nidos desechables, colchones de agua, etc. Hacen más fácil adaptar el uso del Baby Warmer a las necesidades del bebe y las rutinas del hospital.



BW3-001 SISTEMA DE CALENTAMIENTO ESTÁNDAR BABY WARMER INCLUYE:

- BW3-020 Unidad de Control
- BW-50-003 Colchón de Agua
- BW-50-029-1 Una botella de antialgas
- BW3-003 Placa Térmica Bajo Voltaje
- BW-50-025 Nido de Contención (2 unidades)
- 699-1171 Cable de red
- B2-0xx Manual de Instrucciones
- Pedido opcional Colchón de Gel o Foam

BW3-020 UNIDAD DE CONTROL

Nuevo diseño con pantalla fácil de leer.

El nuevo Sistema de Calentamiento BabyWarmer le ofrece 3 diferentes modalidades para calentar usando la misma Unidad de Control y Placa Térmica.

1. El suave y cálido Colchón de Agua Kanmed
2. Un especial suave Colchón de Gel calentado
3. Un Colchón de Foam calentado

Sofisticado sistema de seguridad. También se puede conectar un sensor de temperatura YSI para chequear la temperatura del bebe. Puede usarse solo, colgando de su asa o montado en un pie. Potencia 100-240 V AC o 12-24 V DC. Peso 1,5 kg., Diámetro 14 cm., Altura 21 cm. Consumo media 15W.



BW3-003 PLACA TÉRMICA

Bajo Voltaje 24 V DC, 50W, impermeable y fácil de limpiar. Sin campos dañosos magnéticos o eléctricos - un rasgo único de Kanmed.

Sensores integrados continuamente monitorizan el funcionamiento y temperatura del sistema. Largo 58 cm., Ancho: 25 cm., Grosor: 2 mm



BW3-0837 SOPORTE VERTICAL PARA PIE

Para posicionar la Unidad de Control BW3 en una barra vertical u horizontal.

KANMED^o BABYWARMER



COLCHÓN DE AGUA, INFORMACIÓN GENERAL

Todos los Colchones de Agua Kanmed están fabricados de un resistente, suave plástico. Están contruidos con separadores para reducir el movimiento del agua, pero para mantenerlo suficientemente flexible para responder al movimiento del bebe. Una botella de Antialgas se incluye, la cual está clínicamente probada para mantener el agua limpia por un año.

BW-50-003 COLCHÓN DE AGUA

Este es el más comunmente usado Colchón de Agua. Cuando se llena a la altura de la marca en el colchón, contiene alrededor de 4-4,5 litros de agua. Largo: 60 cm., Ancho: 27 cm.

BW-50-015 COLCHÓN DE AGUA PARA MELLIZOS


Especial Colchón de Agua para mellizos y bebes grandes. Se puede mantener caliente usando sólo una Placa Térmica. Cuando se llena a la altura de la marca en el colchón, contiene alrededor de 10 litros de agua. Largo: 60 cm., Ancho: 60 cm.

BW-50-010 COLCHÓN DE AGUA PARA LA CUNA BABYBED DE KANMED

Especial Colchón de Agua que cubre casi toda la superficie de la Cuna BabyBed de Kanmed (BB-1 ó BB-3). Se puede mantener caliente usando sólo una Placa Térmica. Cuando se llena a la altura de la marca en el colchón, contiene alrededor de 9 litros de agua. Largo: 60 cm., Ancho: 40 cm.

BW3-099 YSI SENSOR DE TEMPERATURA

El sensor de temperatura se conecta en el frontal de la Unidad de Control. La medida de temperatura con alarmas de alta y baja se muestra automáticamente. El sensor de temperatura no controla el calentamiento del bebe.

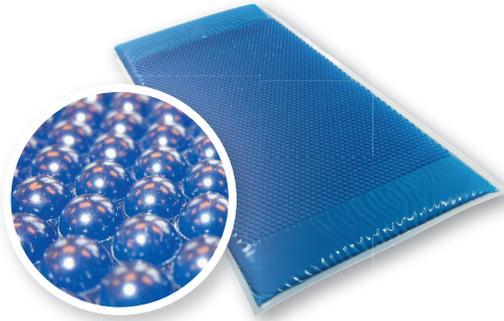

GE-602815 COLCHONETA DE GEL CON BOLSILLO

La Colchoneta de Gel de Kanmed está especialmente diseñada para el Baby Warmer BW3. La Colchoneta de Gel tiene una agradable superficie granulada que la hace suave y confortable para que el bebe repose. Tiene un bolsillo para introducir la Placa Térmica. Si por alguna razón el Colchón de Agua no puede usarse, la Colchoneta de Gel de Kanmed es una opción ideal. Encaja dentro del Nido de Contención BW-50-025. 60 x 28 x 1,5 cm.



BW3-203 COLCHÓN DE FOAM CON BOLSILLO

Este Colchón de Foam es muy suave y fácil de limpiar, está pensado para bebes a termino o casi a término y para proporcionar confort mediante calor. No está diseñado para promover el crecimiento en bebes prematuros. Tiene un bolsillo para insertar la Placa Térmica. 60 x 28 cm.

BW-50-029 ANTIALGAS

Recomendado para ser usado con el Colchón de Agua como prueba clínica para prevenir la formación de algas y bacterias dentro del Colchón de Agua. Mantendrá el agua limpia por un año. Para ser usado cada vez que se cambia o rellena el agua. Caja de 20 botellas.



KANMED° BABYWARMER



BW-50-025 Y BW-50-025-XL NIDOS DE CONTENCIÓN DE KANMED

El Nido de Contención de Kanmed es un nido reutilizable y fabricado en una pieza. Solo hay que introducir el Colchón seleccionado y la Placa Térmica dentro del bolsillo. El Nido de Contención está pensado para facilitar un correcto posicionamiento fisiológico y para proporcionar un ambiente agradable alrededor del bebe. Temperatura de lavado 60° c. Material exterior: Algodón, Relleno: fibra de poliéster. Largo del Nido: 65 cm. Ancho: 35 cm.

Altura: 6 cm., Medida interior: 40 cm.

BW-50-025 Nido Contención azul

BW-50-025-P Nido Contención rosa

BW-50-025-Y Nido Contención amarillo

BW-50-025-XL NIDO DE CONTENCIÓN

El Nido de Contención KanMed es para bebes de más de 4500 gr. Largo: 65 cm. Ancho: 35 cm., Alto: 6 cm.: Medida interior: 60 cm.



BW-50-027 NIDO DE CONTENCIÓN PARA MELLIZOS

Nido de Contención para ajustarse al Colchón de Agua para mellizos. Largo: 65 cm., Ancho: 55 cm., Altura: 50 cm. (Solo en color azul).



BW3-007 CABLE PARA BATERÍA

Para conectar la Unidad de Control a la batería de un coche o similar 12 V DC suministro. Equipado con un conector para encendedor universal para ser usado en vehículos de transporte.



BW-50-200 NIDO DE CONTENCIÓN DESECHABLE

Fabricado en tejido no tejido. Largo: 65 cm., Ancho: 35 cm. Medida interior: 40 cm. Caja de 10 unidades.

CONCLUSIONES

El Sistema de Calentamiento de Kanmed BabyWarmer y la Cuna Kanmed BabyBed permite sacar antes a un bebé prematuro de la incubadora y comenzar el importantísimo vínculo madre-hijo usando el método Canguro piel con piel.



KANMED^o BABYWARMER

Kanmed AB

Gårdsfogdevägen 18B | SE-168 66 BROMMA | SWEDEN

Tel +46 8 56 48 06 30 | Fax +46 8 56 48 06 39

info@kanmed.se | www.kanmed.se